
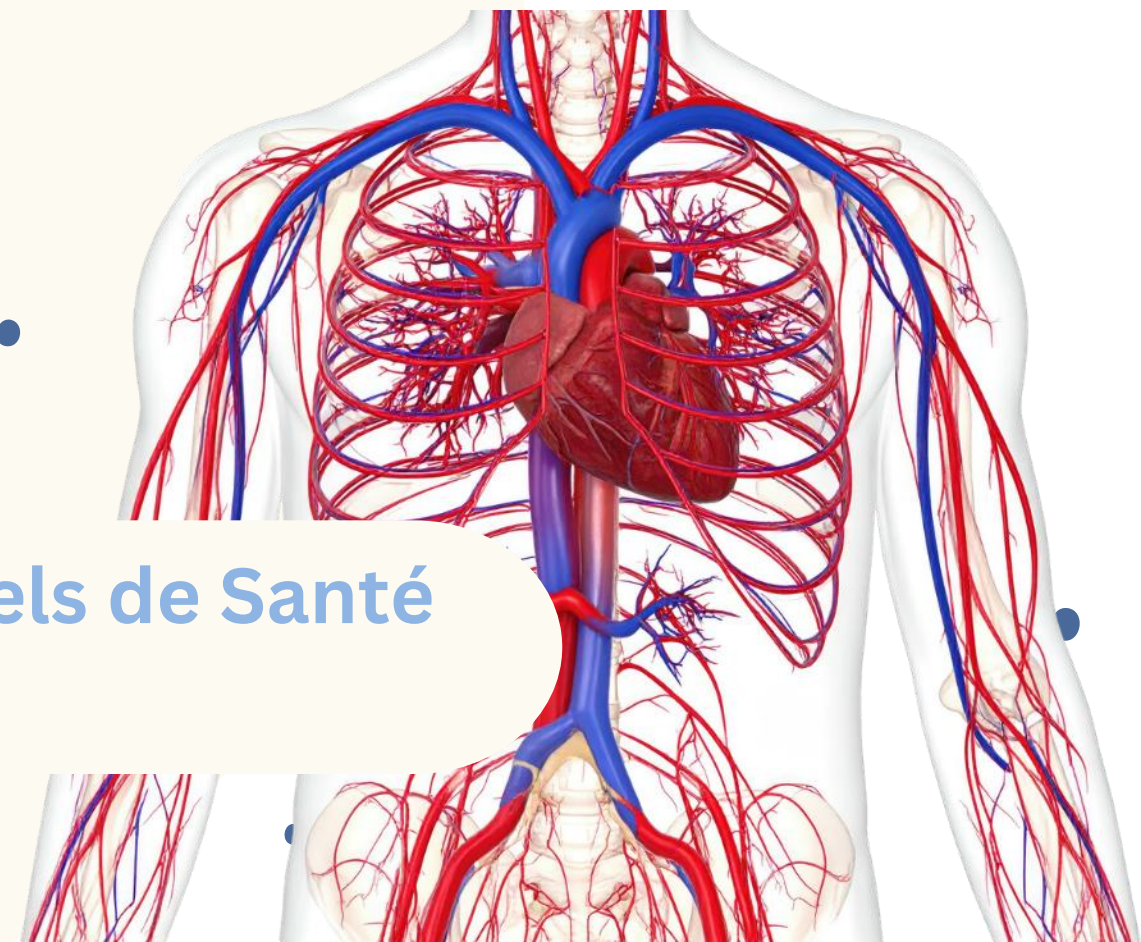


Vocabulaire
ACCES VEINEUX CENTRAL

Atelier


Journée des Instituts de Formation des Professionnels de Santé
24 juin 2026

Nathalie MONTMANEIX & Fernanda DUPLATRE

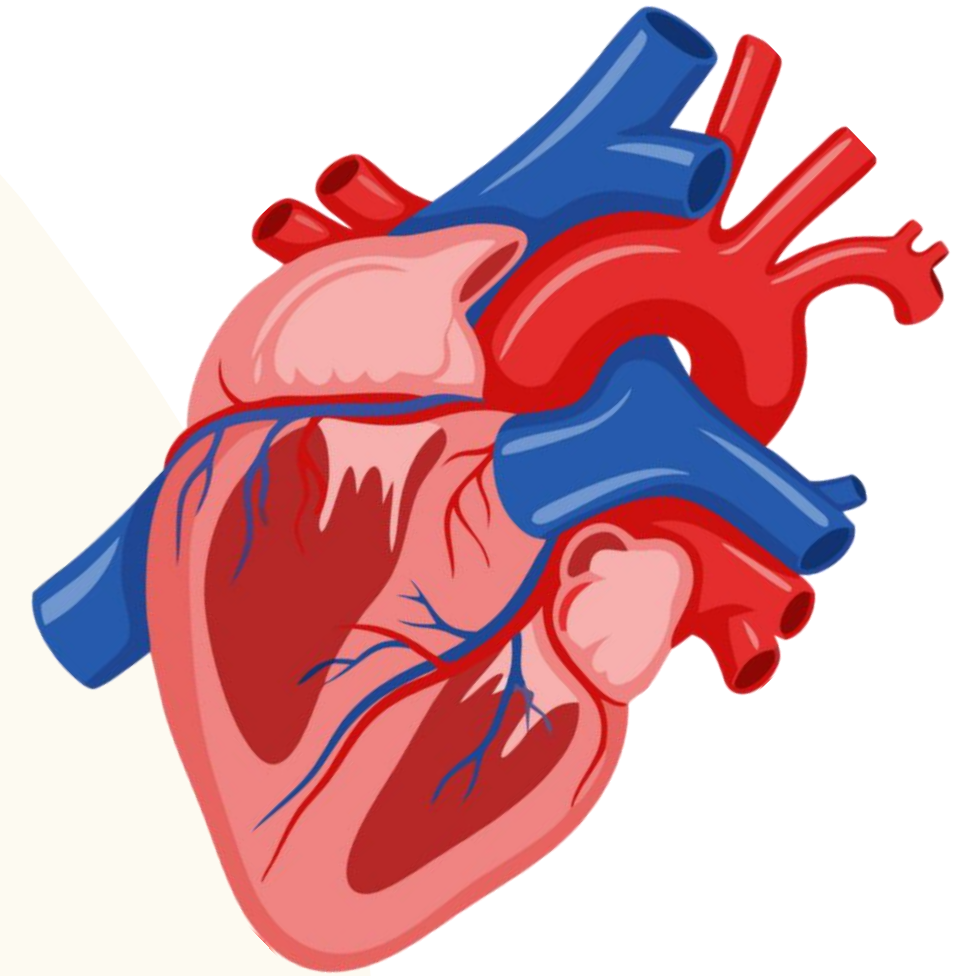


Nomez les dispositifs

Perfusion discontinue

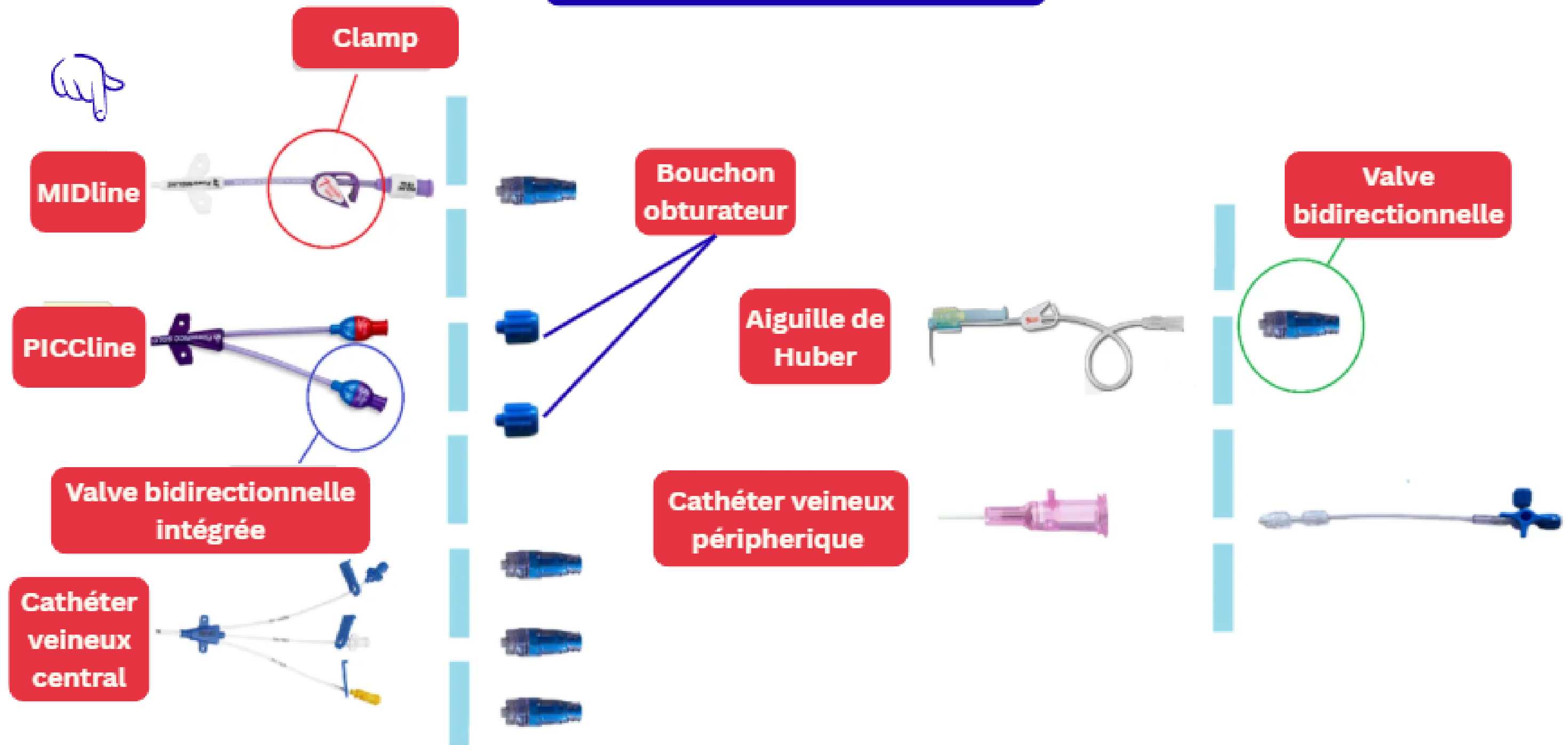



Nomez les dispositifs

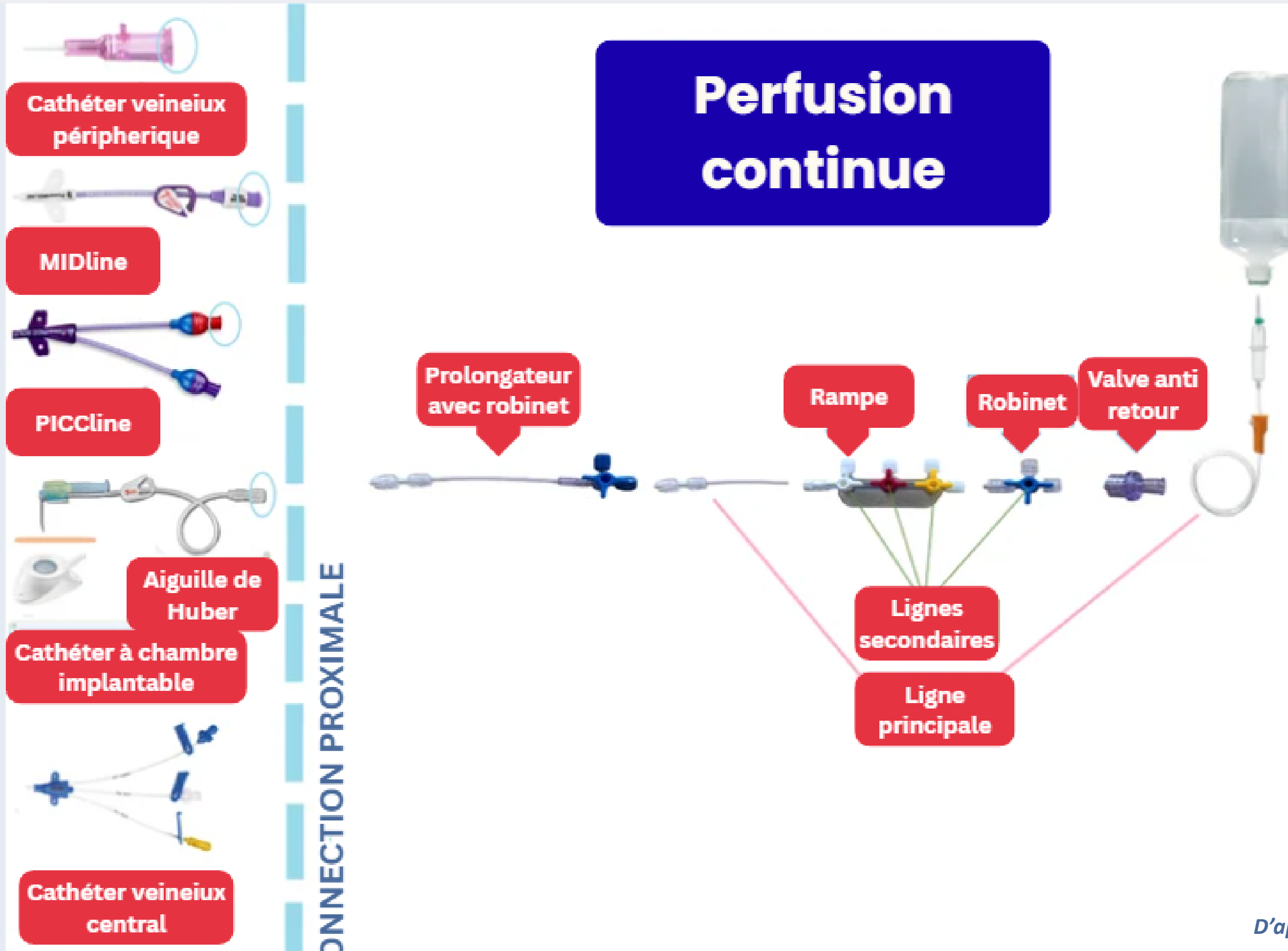



PICC & MID EN PRATIQUE

Quiz

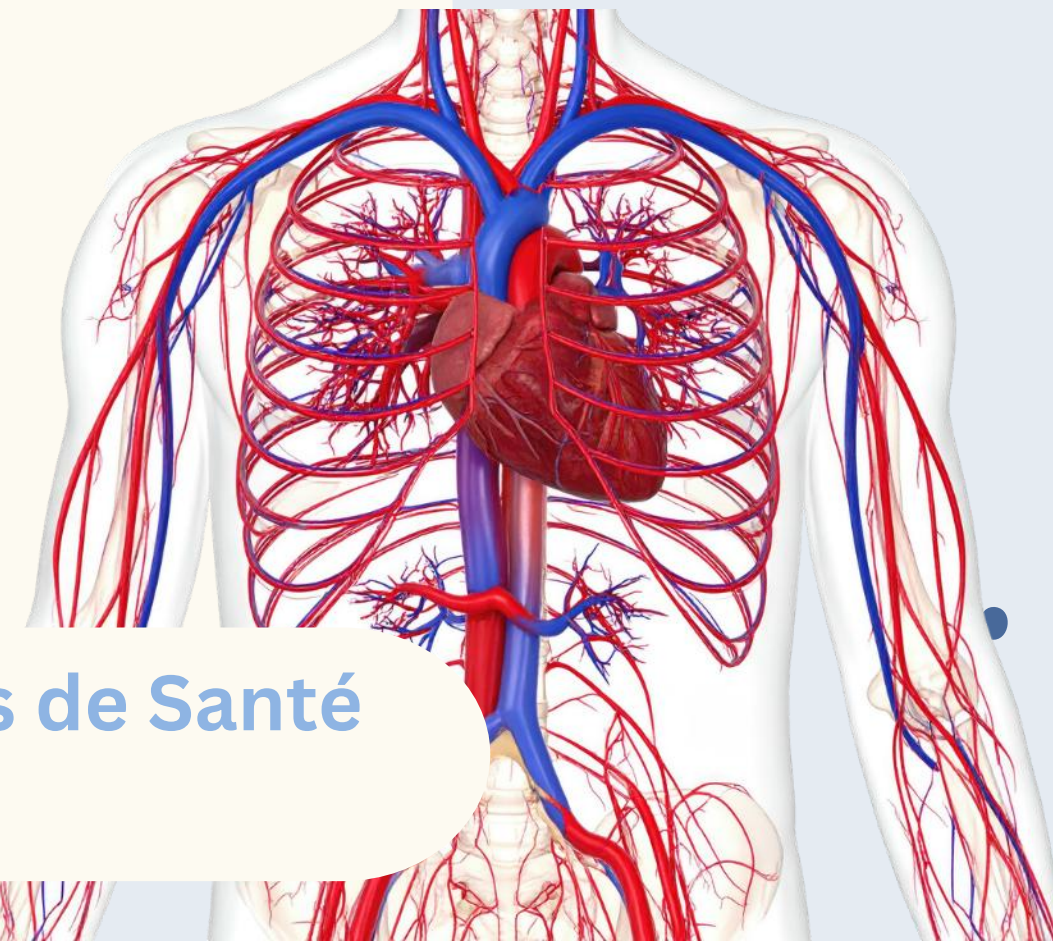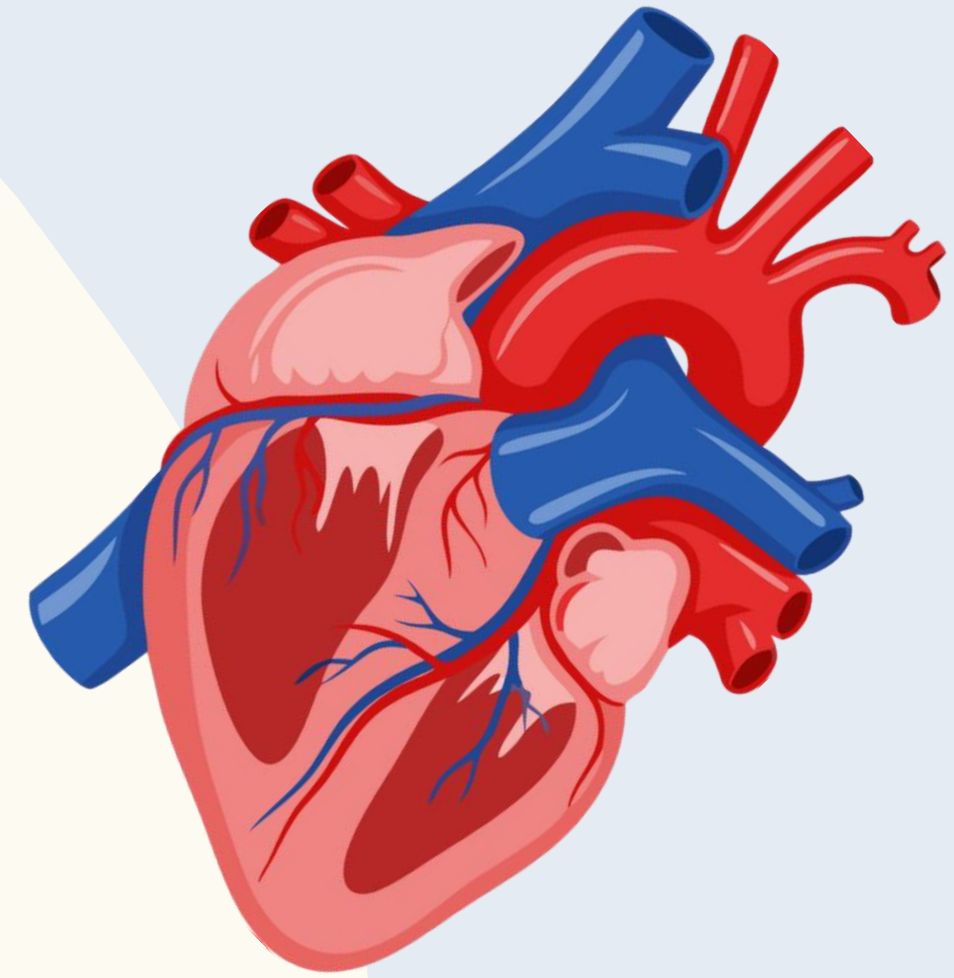

Journée des Instituts de Formation des Professionnels de Santé
24 juin 2026

Q1

Concernant l'utilisation des gants stériles, ils sont utilisés:

A) Au moment du retrait du pansement

B) Au moment de l'antisepsie

C) Lors de la réalisation d'un prélèvement sanguin en proximal

D) Lors de la pose d'une perfusion en distal

E) Lors de la mise en place du stabilisateur

F) Lors du changement de valve

Q1

Concernant l'utilisation des gants stériles, ils sont utilisés:

A) Au moment du retrait du pansement

R 50. « ...L'opérateur porte des gants non stériles à usage unique (UU) pour le retrait du pansement (précautions standard) (AF). »

B) Au moment de l'antisepsie du pansement

R 54 « ...Pour l'antisepsie cutanée, la mise en place du nouveau système de fixation spécifique (« stabilisateur »), et la mise en place du pansement, l'opérateur porte des gants stériles (AF) ».

C) Lors de la réalisation d'un prélèvement sanguin en proximal

R 62. « Pour les manipulations proximales et quel que soit le lieu, en plus de la tenue propre l'opérateur porte un masque de type chirurgical (AF CCI-R74) et des gants stériles (Accord simple CCI-R74). »

D) Lors de la pose d'une perfusion en distal

R 58. « Pour la manipulation de toute connexion de la ligne veineuse, des compresses stériles imprégnées d'un antiseptique alcoolique sont utilisées (AF CCI-R71).3

E) Lors de la mise en place du stabilisateur

R 54 « ...Pour l'antisepsie cutanée, la mise en place du nouveau système de fixation spécifique (« stabilisateur »), et la mise en place du pansement, l'opérateur porte des gants stériles (AF) ».

F) Lors du changement de valve

R 56 « La réfection programmée du pansement comprend le changement du stabilisateur et de la valve bidirectionnelle proximale si elle est présente, en tenant compte des recommandations du fabricant (AF). »



En cas de sécurisation du picc ou du mid avec une bandelette lors de la réfection de pansement, on la positionne :

A) Au plus près du point de ponction


B) Au plus loin du point de ponction

C) Il n'est pas nécessaire de sécuriser le cathéter systématiquement avec une bandelette



[Film Trucs & Astuces PICCMID \(2022\)](#)

À partir de 3'06'' à 3'13''

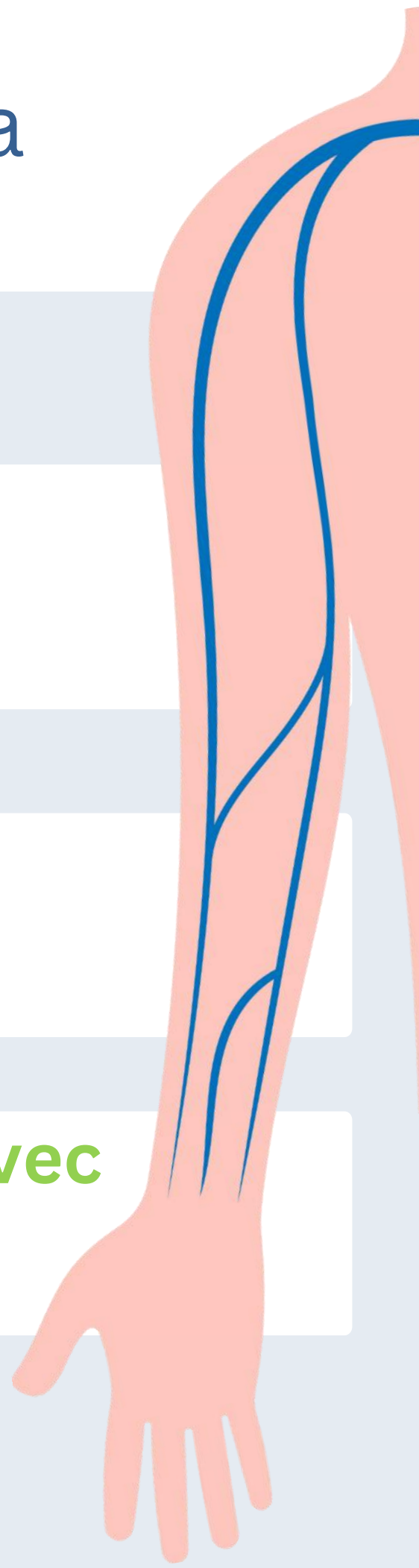



Q3


Lors de la mise en place d'un nouveau stabilisateur quelle est l'ordre correct des étapes à suivre :

A) J'enlève les adhésifs puis colle mon fixateur au bras du patient et positionne le cathéter dans la loge prévue à cet effet

B) Je positionne le cathéter dans la loge prévue à cet effet puis j'enlève les adhésifs et colle mon fixateur au bras du patient



[Film Trucs & Astuces PICCMID \(2022\)](#)
À partir de 2'48'' à 3'31''

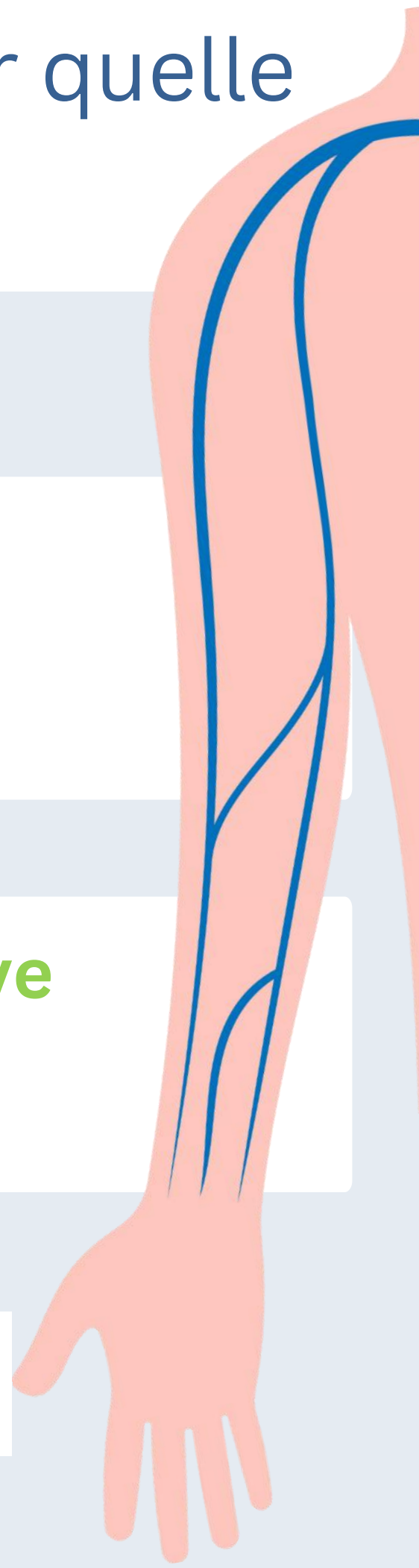

Q4

Concernant le système de fixation de cathéters par ancrage (SecurAcath®) :

A) Le système doit être changé à chaque réfection du pansement

B) Il réduit le risque de retrait accidentel du cathéter

C) Le cathéter doit être sécurisé à l'aide d'une bandelette lors de la réfection du pansement

D) Il facilite l'antiseptise du point d'insertion

E) Il remplace un stabilisateur adhésif




[Film Trucs & Astuces PICCMID \(2022\)](#)

À partir de 7'32'' à 7'41''

[SecurAcath Animation 2](#)

[SecurAcath Dressing Change with Standard Tegaderm](#)

À partir de 0'29'' à 0'59''

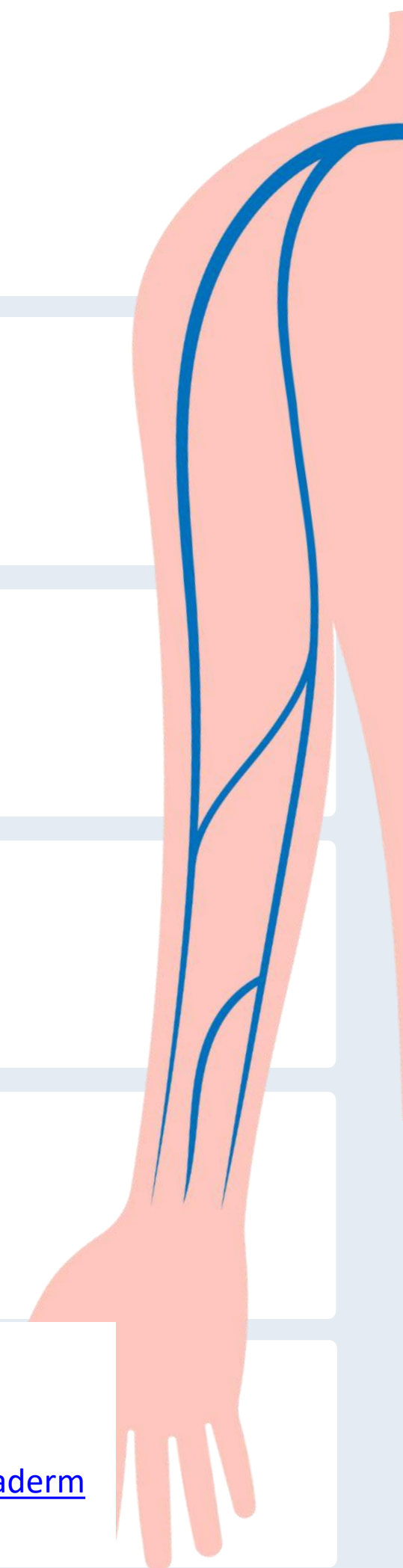


Q5

Sur le maintien des cathéters :

A) Un Mid line avec prolongateur peut être maintenu 3 mois

B) Un PICC line peut être maintenu 3 mois


C) Un Mid line avec prolongateur peut être maintenu 28 jours

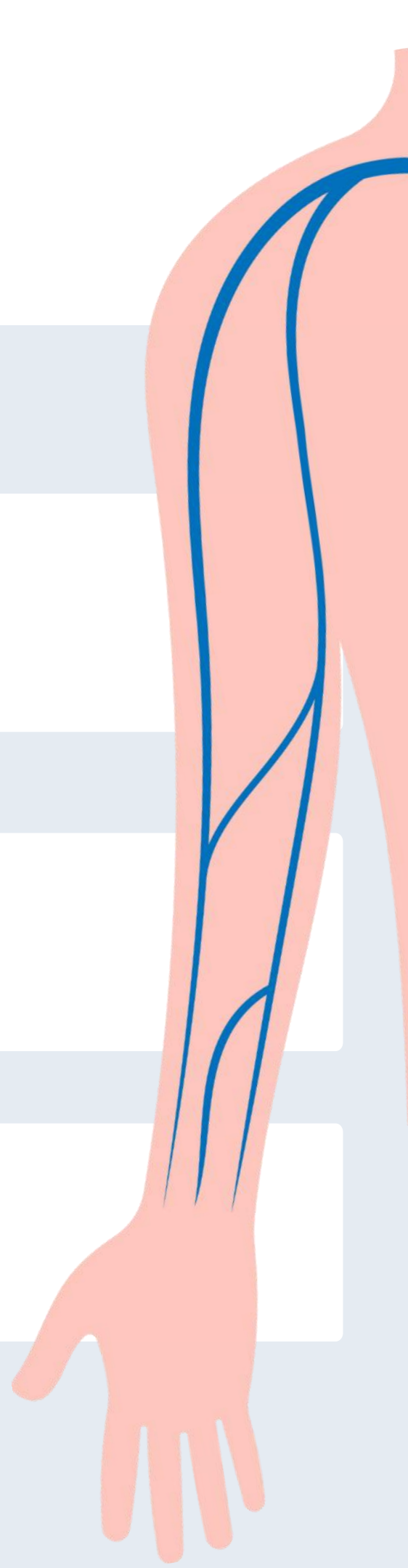

Q5

Sur le maintien des cathéters :

Critère	PICC Line	Midline avec prolongateur intégré	Midline sans prolongateur intégré
Type d'accès	Cathéter veineux central inséré par voie périphérique	Cathéter veineux périphérique profond	Cathéter veineux périphérique profond
Durée recommandée de maintien	Plusieurs semaines à plusieurs mois (généralement 1 à 6 mois selon l'indication)	Jusqu'à 30 jours	≤ 7 jours
Recommandation SF2H	Indiqué pour traitements prolongés et/ou produits veinotoxiques	À privilégier lorsque la durée prévisionnelle est > 7 jours	Réservé aux durées < 7 jours

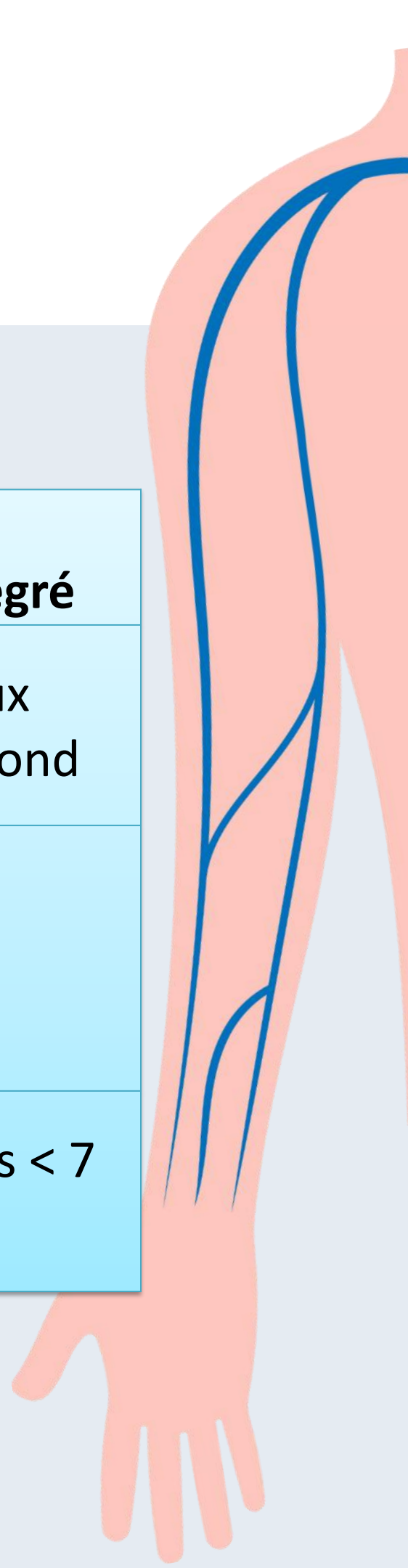



Q6

Concernant les valves bidirectionnelles :

A) Permettent d'éviter les AES

B) La désinfection des valves avant utilisation se réalise avec compresses stériles + alcool 70°
(Antiseptique alcoolique par défaut) et hygiène des mains

C) Si j'utilise des valves bidirectionnelles avec pression positive, je déconnecte la seringue sans clamber

D) Si j'utilise des valves bidirectionnelles sans pression neutre ou négative, je clame le cathéter avant la déconnexion de la seringue et je déclame après la déconnexion de la seringue

E) Une valve bidirectionnelle (non intégrée au cathéter) est obturée par un bouchon stérile

F) Une valve bidirectionnelle est un dispositif de perfusion permettant un accès direct à la voie veineuse et assurant son obturation automatique (système clos)





Concernant les valves bidirectionnelles :

Connaissez vous une astuce pour savoir si une valve bidirectionnelle est à flux positif, neutre ou négatif?



[Film Trucs & Astuces PICCMID \(2022\)](#)

À partir de 9'25'' à 11'03''



Q7

Le rinçage pulsé est réalisé :

A) Au moyen d'une ou plusieurs seringues de 10 ml NaCl à 0,9%


B) Par poussée continue

C) Par trois pulsées successives

D) Par plusieurs poussées successives



[Picline : réfection du pansement et rinçage pulsé](#)
À partir de 3'29'' à 3'34''

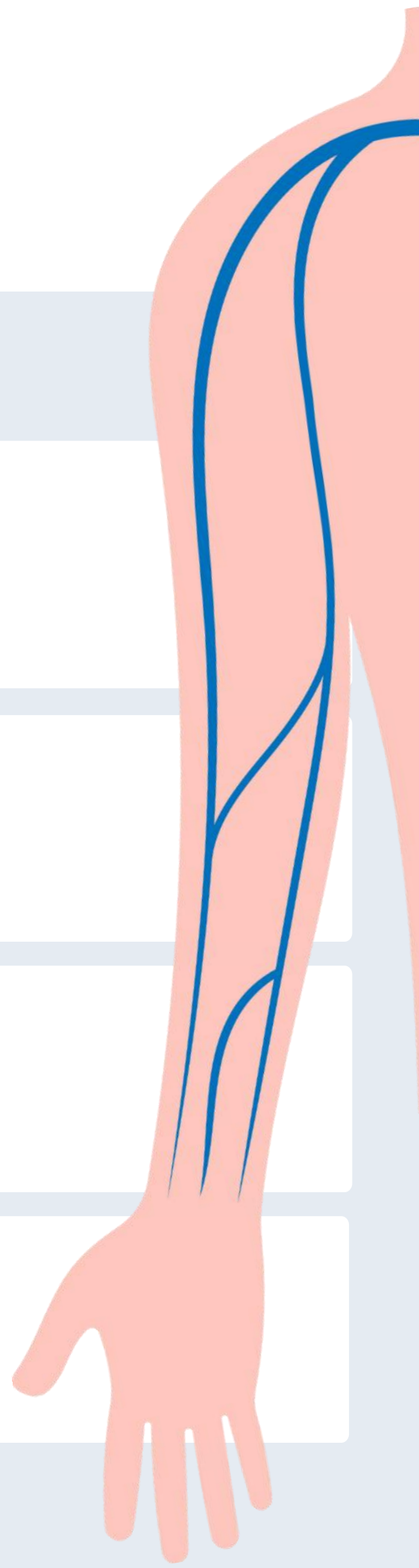

Q7 Parmi ces produits, lesquels présentent une contre-indication à être administrés sur un Midline ?

A) Chimiothérapie

B) Antibiotiques (avec durée moins de 4 semaines)


C) Alimentation complète parentérale pour voie centrale (type Olimel®)

D) Culots globulaires

E) Produits hyperosmolaire (ex : Mannitol®)




Q8 Trouvez l'erreur sur l'image


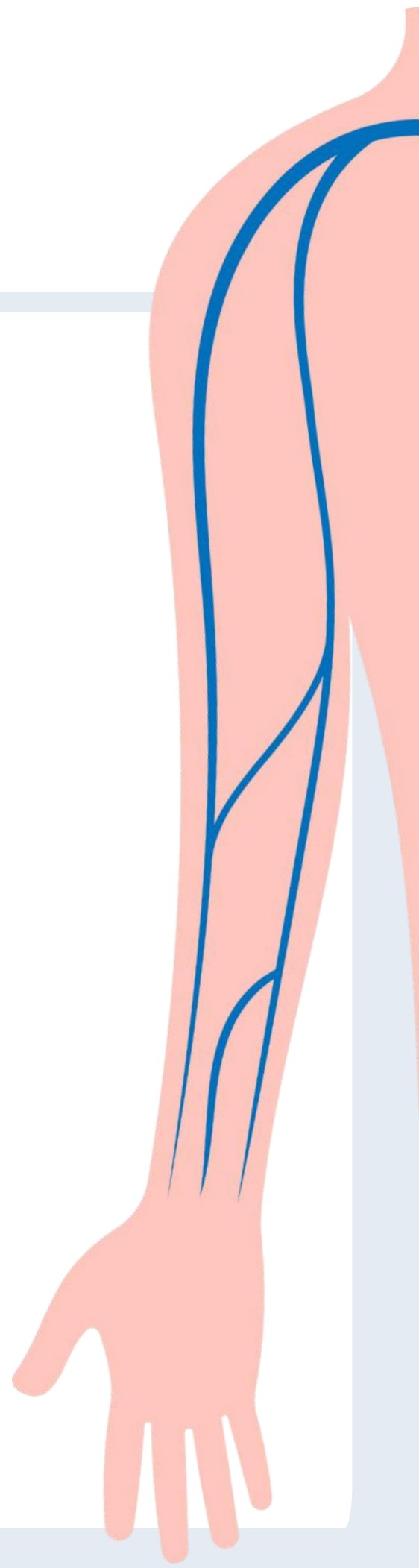


Q9

Trouvez l'erreur sur l'image

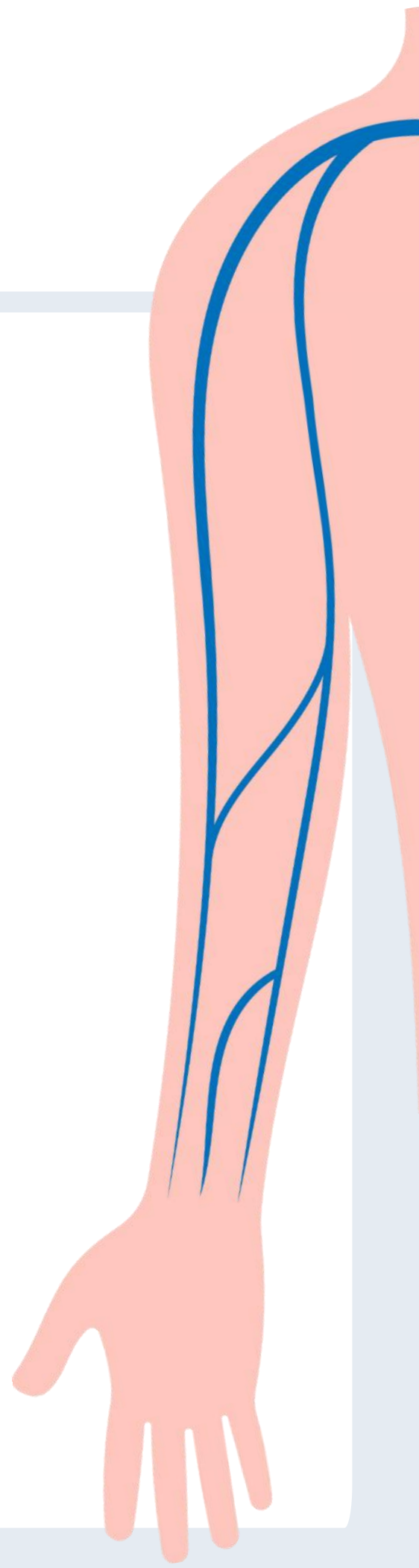

Q10 Trouvez l'erreur sur l'image

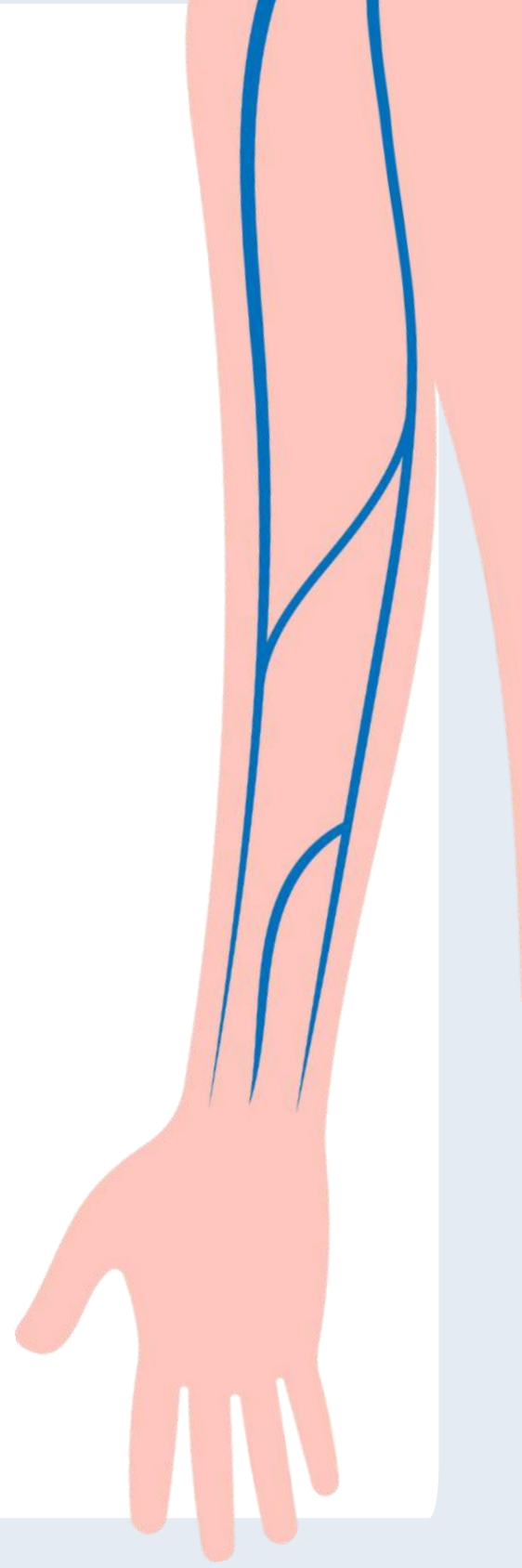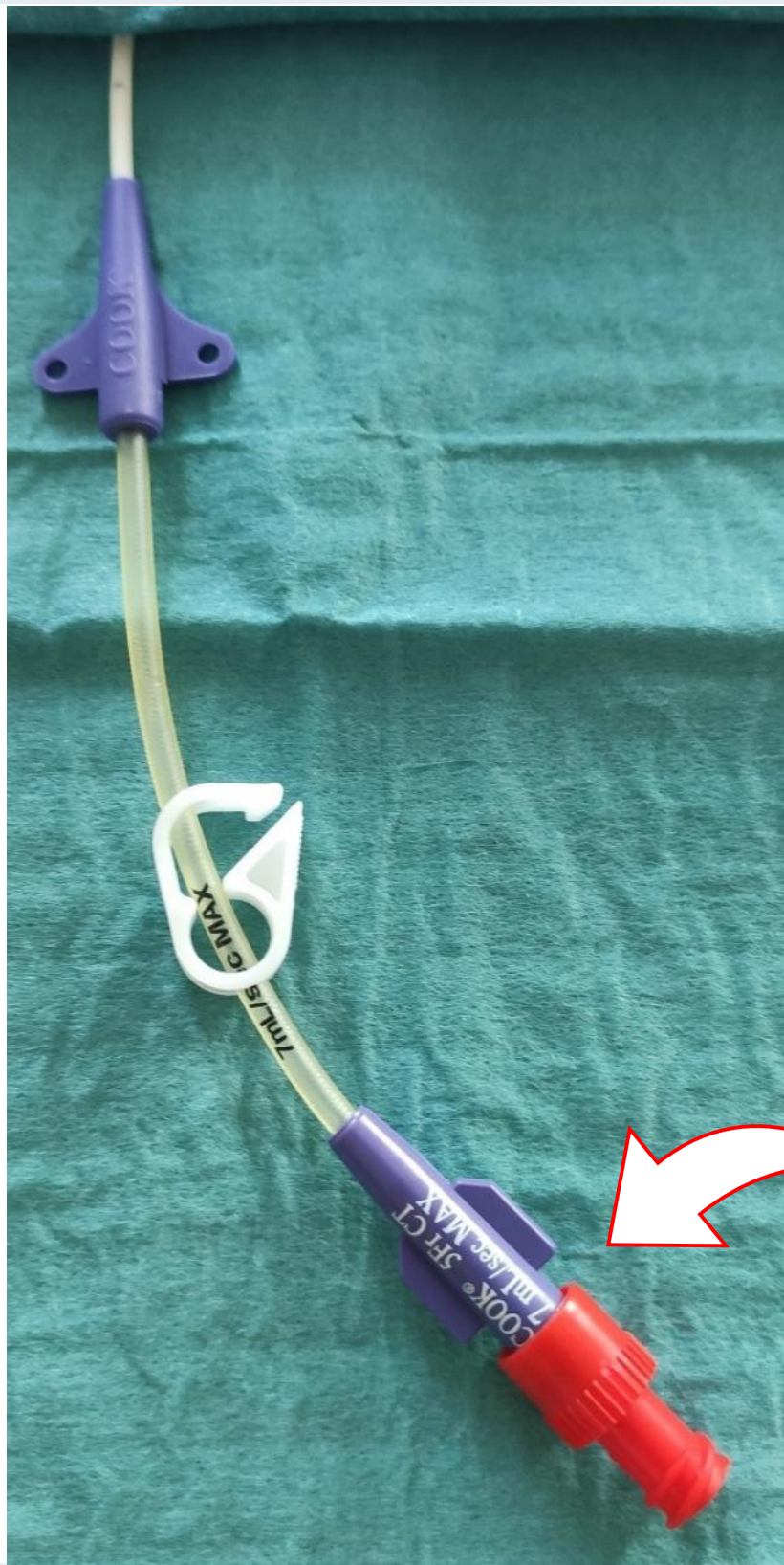

PICC & MID EN PRATIQUE

Fin !

Bravo et merci !

